

ZÁRUČNÝ LIST
Chodúľa pevná, skladacia **GEBO**

Prevedenie: Chodúľa pevná	Zákazník:
Model: GEBO	
Výrobné číslo:	Telefón:
	Zdravotná poisťovňa:
Kontroloval:	

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na skryté chyby materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania, nesprávnej údržby, násilného poškodenia nekvalifikovaným zásahom alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely.

Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonanie zmien z dôvodu technického zlepšenia modifikácie dizajnu.

UPOZORNENIE:

Pri nároku na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vášho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomôcku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom. V opačnom prípade strácate nárok na bezplatnú opravu.

Záručný a pozáručný servis:

REVO – MAT, s.r.o.

Nikola Tesla 28

921 01 Piešťany

Tel/fax.: 032 776 2949, 033 381 3034

Mob.: +421 917 666 725

+421 907 951 707

e-mail: revomat.servis@gmail.com

matus.bubak@rehacare.sk

Vydal:

Dňa:

.....
Pečiatka a podpis

Chodúľa pevná, skladacia GEBO

Výrobca:

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13

D -76307 Karlsbad


Deutschland

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku:

REHA-CARE, s.r.o.

M.R. Štefánika 1790/101

922 03 Vrbové

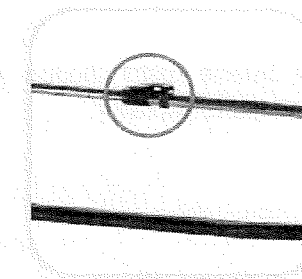

Zabezpečenie teleskopického uzáveru proti samovoľnému zloženiu chodúľky

Návod na použitie

Chodúľa je určená pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Používa sa tým spôsobom, že sa rukami uchytíme ergonomických rukoväti chodúle. Skladanie sa prevádza pákovým systémom v prednej časti chodúťka. Nastavenie celkovej výšky chodúle prevedieme zaistovacím kolíkom a následným vysunutím nožičiek.

Popis výrobku

Chodúľa je vyrobená z duralovej konštrukcie. Rám je skladací.

Údržba chodúle

Na čistenie kostry chodúle je možné použiť bežné saponátové prípravky.

<ul style="list-style-type: none">- chodúľa pevná skladacia- výškovo nastaviteľná v piatich polohách- zaistovacia predná priečka jednodielna- bočné strany po rozložení pevné- duralová konštrukcia povrchovo upravená bronzovým eloxom- možnosť použitia iba na pevnom a rovnom podklade !	Základné parametre chodúle: Celková výška: 82 - 92 cm Celková šírka pri rozložení: 53 cm Celková hĺbka pri zložení: 10 +/- 2 cm Váha: 2,2 kg Nosnosť: 120 kg
--	--

Dátum poslednej revízie textu: 27.11.2014

Záručné a pozáručné opravy		
Popis závady	Dátum	Pečiatka a podpis